



# Gebruiksaanwijzing eFlow<sup>®</sup> rapid, Tolero, Altera en Zirela



De Tolero, Altera en Zirela worden bij de medicatie meegeleverd. Gebruik **altijd** de vernevelaar die bij de medicatie wordt meegeleverd. Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houdt u daarom aan de volgende instructies.

## In elkaar zetten

- Plaats het inademventiel (E) met de aerosolproductie-eenheid (D) in de vernevelkamer (F). LET OP: raak hierbij het metalen gedeelte in het midden van de aerosolproductie-eenheid niet aan (zie afbeelding 2)!
- Sluit nu de vernevelkamer (F) op het medicatiereservoir (C).
- Pak het mondstuk (G) en sluit deze aan op de vernevelkamer. Indien u antibiotica vernevelt plaats dan de Pari Filter/Valve Set tussen de vernevelkamer en het mondstuk. Gebruik in dit geval het mondstuk zonder een blauw uitademingsventiel (zie afbeelding 1).
- Het geheel kan nu worden vastgeklikt aan het vernevelaarsnoer (B) die aan de besturingseenheid (eBase) is gekoppeld.
- Schenk de medicatievloei-stof in het medicatiereservoir en sluit af met de dekseldichting (I) en afsluitkap (H).


## Vernevelen

- Sluit de eBase aan op de netstroom of gebruik batterijen.
- Zorg voor een goede positie.
- Lippen goed sluiten rond het mondstuk van de vernevelaar.
- Zet de vernevelaar aan, het groene LED lampje gaat branden en er klinkt eenmalig een signaal.
- Houd de vernevelaar horizontaal.
- Apparaat schakelt zichzelf uit bij einde behandeling en er zal een vinkje op de besturingseenheid (eBase) verschijnen.
- Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

LET OP: Bij gebruik van verschillende medicatie in de eFlow rapid onderdelen tussendoor grondig afspoelen.



Bij gebruik van antibiotica gebruikt u de **Pari Filter/Valve Set** om te voorkomen dat bij uitademing medicatie in de ruimte komt. Dit ter bescherming van de mensen om u heen.

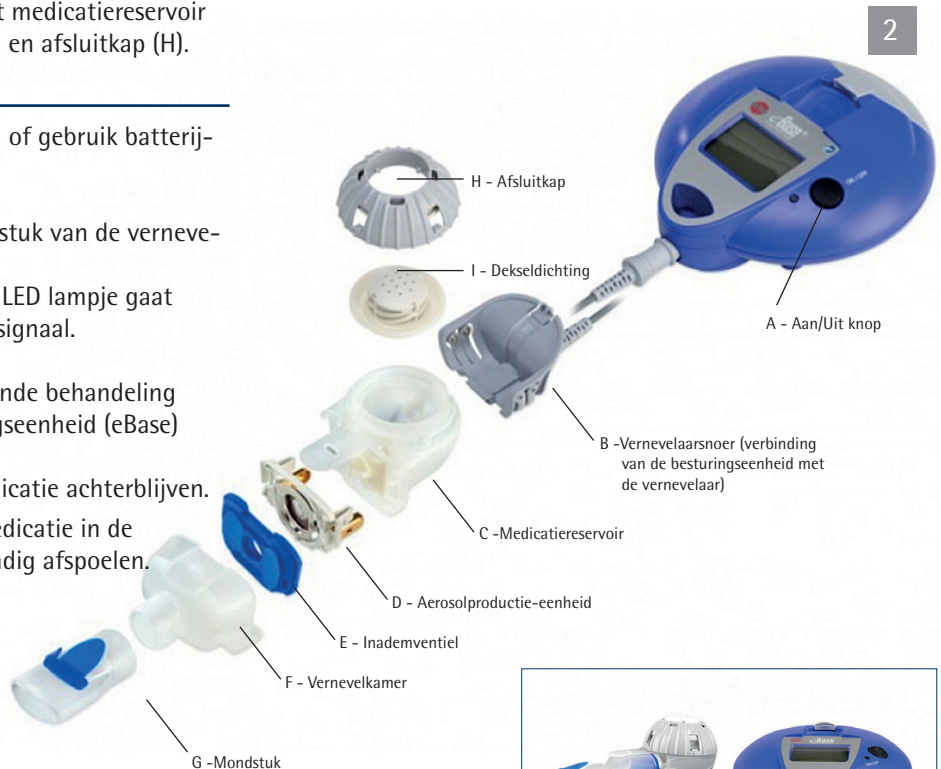

eFlow rapid eBase

## Verneveltijd

- Circa 5 minuten.

## Levensduur apparatuur en toebehoren

- Vernevelaar: 6 maanden, bij gebruik van eFlow rapid.

## Netstroom of batterijen

- Voor netstroom is er een netstroomkabel bijgeleverd.
- Batterijen: 4 x 1,5 V mignon (AA LR6/alkaline).
- Gebruik nieuwe batterijen of gebruik de adapter voor netstroom.
- Oplaadbare batterijen: 4 x 1,2 V mignon (AA rechargeable, min. 2000 mAh).
- Oplaadbare batterijen laden niet op in dit apparaat.
- Geen energie bij knipperen rood LED lampje.



## Schoonmaakinstructie eFlow<sup>®</sup> rapid, Tolero, Altera en Zirela



Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u het goed schoon houdt. Houdt u daarom aan de volgende instructies.

### Schoonmaakinstructies vernevelaar

#### Besturingseenheid/eBase

- 1x per week met vochtige doek schoonmaken.

#### Vernevelsnoer

- Voorzichtig met vochtige doek schoonmaken bij verontreiniging.

#### Na elke behandeling (vernevelaar)

- Ontkoppel vernevelaarsnoer van de vernevelaar.
- Haal alle onderdelen uit elkaar (ook van het deksel en ook van de Pari Filter/Valve Set).
- Giet overtollige medicatie uit het reservoir.
- De vernevelaar goed afspoelen onder handwarm leidingwater. LET OP: maak de aerosolproductie-eenheid nooit met een borstel of andere voorwerpen schoon.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in warm leidingwater met 3 druppels afwasmiddel.
- Spoel alle onderdelen nog eenmaal af onder warm leidingwater zodat de zeepresten zijn verwijderd.
- Laat drogen aan de lucht op een schone, pluisvrije theedoek.

#### 1 x per week

- Alle onderdelen moeten uitgekookt worden.
- Doe alle onderdelen van de vernevelaar in het water zodra het kookt. De onderdelen zullen dan door beweging de bodem niet raken. **Dit voorkomt smeltgevaar.**
- Gedurende 5 minuten uitkoken.
- Schud overtollig water af.
- Laat onderdelen drogen aan de lucht op een schone, pluisvrije theedoek.




### Easycare (1 x per week gebruiken)

- Klik Easycare open (zie afbeelding 1).
- Klik aerosolproductie-eenheid in de Easycare.
- Klik Easycare dicht.
- Sluit Easycare aan op het vernevelsnoer.
- Spuit circa 5 ml steriel water in de opening (gedestilleerd water en 2 spuitjes zijn meegeleverd).
- Zet besturingseenheid aan gedurende tenminste 10 minuten.
- Besturingseenheid schakelt uit wanneer spoelen klaar is.
- Na uitzetten kan er verneveldamp uit de opening komen. Dit is normaal.
- Verwijder vernevelsnoer.
- Open Easycare en verwijder aerosolproductie-eenheid.
- Laat overgebleven vloeistof uit de Easycare lopen.

#### Na elk gebruik van de Easycare

- Easycare reinigen met warm leidingwater en afwasmiddel.
- Open geklapt laten drogen aan de lucht.
- NOOIT vaker dan 2x per week gebruiken. Dit heeft een averechts effect op de verneveltijd.
- Niet uitkoken!

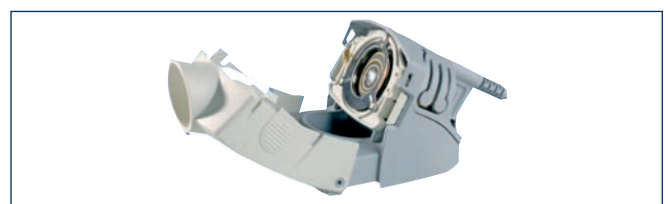

LET OP: De Aerosolproductie-eenheid mag alleen aan de zijkanten worden vastgepakt.