



Gebruiksaanwijzing vernevelaarapparaat PARI BOY Classic met LC sprint

Voor een goede werking van uw vernevelaarapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- Plaats het mondstuk op de vernevelaar. Zorg dat het blauwe uitademventiel aan de bovenzijde zit.
- Sluit de slang aan de onderkant van de vernevelaar aan. Plaats het andere uiteinde van de slang in de Pari Boy Classic.
- Plaats de stekker in het stopcontact.

Vernevelen

- Maak het klepje aan de bovenkant van de vernevelaar open en giet hier de medicatievloeistof in.
- Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- Plaats uw mond niet over het uitademingsventiel van het mondstuk (blauw).
- Houd de vernevelaar rechtop.
- Adem rustig en diep in en adem onspannen uit.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.

Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

Merkt u dat het vernevelen langer duurt? Maak dan uw vernevelaar volledig schoon aan de hand van de schoonmaakinstructies. Deze staan beschreven op de achterkant van deze kaart.

Ademt u te snel? Dan komt het PARI LC SPRINT PIF control systeem in actie! Dit is een geïntegreerde trainingstoel die het aanleren van een effectieve inhaleer techniek ondersteunt. Bij een te snelle of harde inademing, wordt het klepje (a) naar beneden getrokken, waardoor de opening (b) gesloten wordt. Hierdoor wordt u gedwongen om anders te gaan ademen.

Verneveltijd

- Circa 5 tot 8 minuten (afhankelijk van druppelgrootte).

Algemeen

- Volg de schoonmaakinstructies nauwkeurig op (zie achterzijde).





Schoonmaakinstructie vernevelaarapparaat PARI BOY Classic met LC sprint

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u het goed schoon houdt.
Houd u daarom aan de volgende instructies.

Compressor en vernevelslang.


- 1x per week met een vochtige doek schoonmaken.
- Haal na elke vernevelbeurt de vernevelaar van de slang en zet de compressor aan. Hierdoor wordt het vocht uit de slang geblazen.

Filter compressor

- 1x per jaar vervangen.
- 1x per 2 weken controleren op vervuiling.



Wassen met drie druppels afwasmiddel.

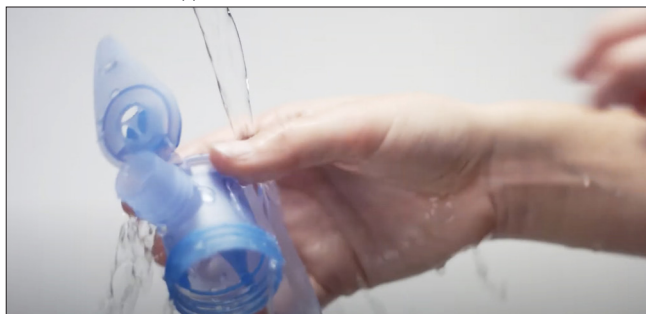

Afspoelen onder handwarm kraanwater.



Uitkoken, 5 minuten of steriliseren in een sterilisator.

Na elke behandeling (vernevelaar)

- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Spoel alle onderdelen af onder handwarm leidingwater.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm leidingwater met drie druppels afwasmiddel.
- Borstel met een zachte borstel forse verontreinigingen af.
- Spoel alle onderdelen nog éénmaal af.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone, pluisvrije theedoek.

1x per dag

- Nadat bovenstaande stappen gedaan zijn, brengt u een pan met ruim water aan de kook.
- Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Dit kan smelting veroorzaken.
- Laat alles 5 minuten koken.
- Spoel de onderdelen daarna grondig af onder handwarm leidingwater.
- Laat de onderdelen aan de lucht drogen op een schone, pluisvrije theedoek.

Er mag ook gebruik gemaakt worden van een sterilisator.

Minimale schoonmaakinstructies vernevelaar

Na elke behandeling:

- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Grondig afspoelen onder handwarm leidingwater.

1x per dag:

- Voer eerst de stappen 'na elke behandeling' uit.
- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm leidingwater met drie druppels afwasmiddel en spoel daarna alles grondig af met handwarm leidingwater.

1x per week:

- Voer eerst de stappen 'na elke behandeling' en '1x per dag' uit.
- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Kook alle onderdelen 5 minuten uit en spoel daarna alles grondig af onder handwarm leidingwater.

Vervanging onderdelen

- Compressor 1x per 5 jaar.
- Vernevelaar en slang 1x per jaar.
- Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te testen.